

Cornerstone[®] Mobile

Версия ПО Cornerstone для мобильных устройств

Версия для мобильных устройств программного обеспечения Cornerstone дает возможность удаленного доступа к прибору из программной среды смартфона, ноутбука, планшета. Как это работает:

- Соединение - стандартный механизм установки удаленного соединения через сервер в Интернете, позволяющий устанавливать безопасное соединение между прибором и удаленным устройством пользователя. ПО сервера может быть также размещено в сети пользователя.
- Аутентификация - для каждого прибора Cornerstone, подключенного с согласованным именем и ключом к серверу, сервер направляет ID пользователя и пароль к прибору для идентификации.
- Хранение данных - информация сохраняется только прибором Cornerstone, не хранится на Интернет сервере и не доступна с момента отключения удаленного устройства от сервера.



Окно приложения

Уведомления

У пользователя есть возможность настройки получения уведомлений по электронной почте, текстовым сообщением или в среде мобильного приложения Cornerstone в зависимости от определенных событий. Например, прибор может отослать уведомление в случае возникновения каких-то помех, препятствующих работе в автоматическом режиме, проблем на этапе диагностики. Также можно настроить, например, автоматическое отключение после выполнения определенного анализа, в случае возникновения программной ошибки или в случае прерывания процесса анализа.

Ключевые особенности


- надежная и безопасная передача данных
- возможность подключения неограниченного количества устройств к прибору
- получение уведомлений по электронной почте, в виде текстового сообщения, в среде Cornerstone App
- доступ к неограниченному количеству приборов
- удобный дизайн Cornerstone Mobile позволяет работать комфортно и эффективно
- мгновенная связь с лабораторией для внесения изменений в процесс анализа

Совместимость*

Использование Cornerstone Mobile возможно на устройствах:

- iPhone[®]
- iPad[®]
- смартфоны Android™
- планшетные ПК Android™
- Windows desktop (версия V2.4.2 и ниже)


* Пожалуйста, учтите, что мобильное устройство не входит в комплект поставки анализатора Cornerstone

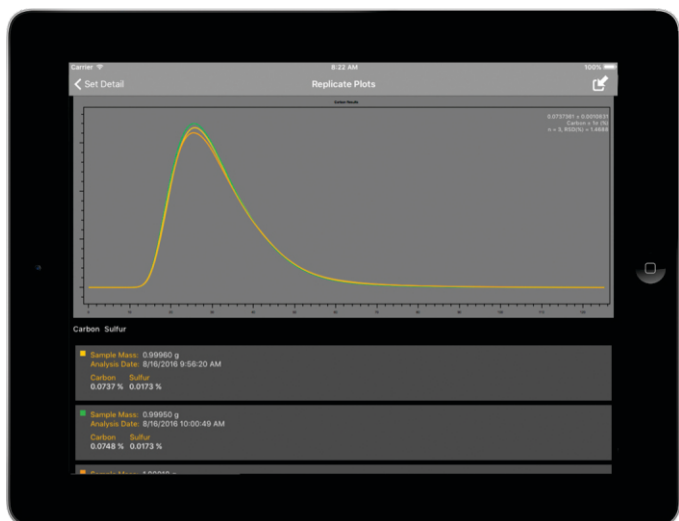

iPad®



iPhone®

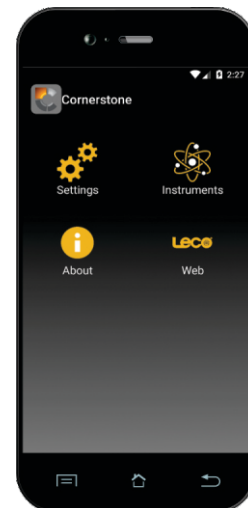

Android™

Как приобрести

Cornerstone Mobile можно приобрести, купив подписку сроком на 1 или 3 года. Одна подписка обслуживает только один инструмент, но без ограничений по количеству мобильных устройств, которые могут подключаться к прибору. Заказные номера:

619-592-882-B/O - подписка сроком на 1 год
 619-592-899-B/O - подписка сроком на 3 года

Как только подписка оформлена, сервисной службой LECO Вам будет направлен код авторизации, необходимый для активации Вашей версии Cornerstone Mobile. После этого, Вам нужно будет выполнить настройку всех прочих параметров, как это описано в инструкции по эксплуатации к прибору.

Для того, чтобы установить приложение, Вам нужно выполнить поиск по словам "LECO" или "LECO Cornerstone" в онлайн магазинах, например, AppStore, Play Market или по ссылке, указанной в инструкции по эксплуатации.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с представителем компании ЧП "ЛЕКО УКРАИНА" по телефону +38 (044) 449-17-20, также приглашаем Вас посетить наш веб-сайт ua.leco-europe.com.

Android - торговая марка компании Google Incorporated.
 iPhone и iPad - торговые марки компании Apple Incorporated.
 Windows - торговая марка компании Microsoft Corporation.
 LECO и Cornerstone - торговые марки компании LECO Corporation.

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЕКО УКРАИНА»
 Киев, ул. Полевая, 24д, офис 117, 03056, Украина
 тел./факс: +38 (044) 494-17-20/21
 E-mail: info_ua@leco.com
www.ua.leco-europe.com

LECO®
 Delivering the Right Results